

微生物センサ

BioSentinel

MODEL 3070

カビ・細菌を10分で検知
品質・衛生管理に

NEW



最短10分で高速計測

カビ・細菌の培養不能菌や死菌を含む微生物量を最短10分で計測できます。

誰でも簡単操作

知識や経験がなくても簡単。
安定した計測精度が自動で得られます。

軽量・コンパクト

移動も簡単な小型設計。
あらゆる場所の環境モニタリングが可能です。

微生物量を連続モニタリング

微生物量の経時変化をモニタリングできます。

PC接続で複数センサの計測データを一括管理

複数ポイントの同時モニタリングが可能です。

スマートフォンなどのユーザー端末からデータ閲覧

外部から環境モニタリングの情報をタイムリーに把握し
異常値の発生時などにおけるリスク管理が可能です。

計測方法（蛍光検出法）について

粒子サイズ分離

巨大粒子はサイクロンで排除

静電補集

捕集プレート表面に
菌・微粒子を静電補集


蛍光物質生成反応

生物特有反応
→微生物のみ蛍光物質生成

蛍光計測

浮遊微生物量を算出し経時変化
を表示（最短10分間隔）

独自の加熱処理により
微生物の蛍光が増大
(特許番号5275522)

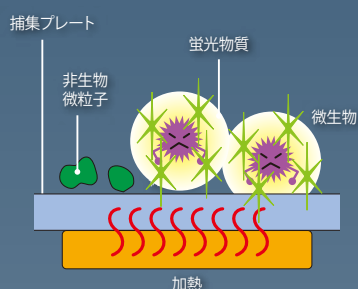

用途



食品製造の環境管理



福祉施設、病院の環境管理



医薬品・医療機器製造の環境管理



化粧品製造の環境管理

本体仕様


品名	微生物センサ	
モデル番号	3070	
検出方式	蛍光検出法(加熱蛍光増大法)	
推奨清浄度区分	グレードC (ISO Class 8) 相当	
計測時間(吸引+測定)	吸引時間 5 ~ 120 分(1 分単位で設定可能)、測定時間 5 分(固定)	
計測間隔	連続設定もしくは 10 分 ~ 1440 分(24 時間)(1 分単位で設定可能)	
測定回数	連続測定もしくは 1 ~ 99 回で設定可能	
データ出力モード	蛍光強度 (V/sec) もしくは微生物量 (個/m ³)	
ユーザー権限、パスワード設定	Administrator / User / Guest	
パラメータの設定上限数	100ヶ	
最大データ保存数(内部メモリ)	5,000回分	
保存データ形式	CSV形式	
電源電圧	ACアダプター	定格入力AC100 V~240 V (日本国内はAC100 Vのみ)、50/60 Hz
	バッテリー(別売品)	充電式バッテリー(リチウムイオン) 動作時間:16時間 *1
消費電力	28[VA]±25[%] (ACアダプター使用時)	
使用周囲温湿度範囲	10~40℃、85%RH以下(ただし、結露なきこと)	
保存周囲温湿度範囲	-10~50℃、90%RH以下(ただし、結露なきこと)	
外部I/F	LAN	1ポート(10BASE-T/100BASE-TX)
	USB	1ポート(USB2.0) <FATフォーマットされたUSBメモリのみ>
表示部	モノクロLCD、英数字2行×16文字	
ブザー	設定値オーバー警告用ブザー	
付属品	ACアダプター、取扱説明書	
ソフトウェア対応OS	Windows、Vista、7/8 *2	
外形寸法(mm)	幅214×奥行214×高さ194.5(ゴム脚/突起部含まず)	
質量	約4 kg (バッテリー搭載時)	

*1 連続動作の計測結果。パラメータ設定によっては動作時間が変わることがあります。

また、バッテリーの放充電を繰り返すことで動作時間が短くなることがあります。

*2 Windowsは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

応用例

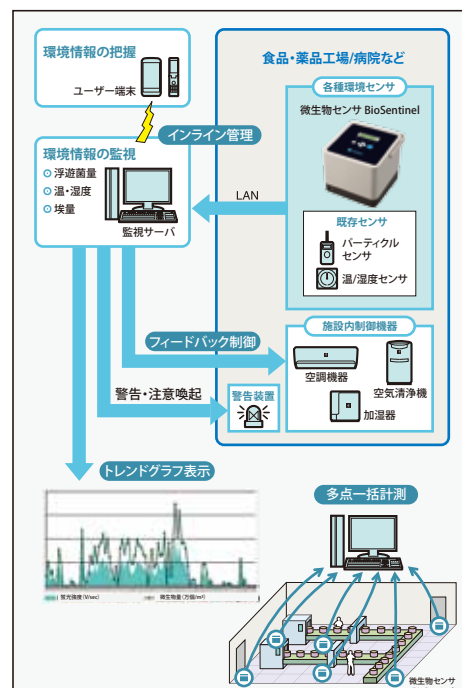

インライン管理/各種センサと連動させ情報を一括収集。

測定データはユーザ端末にも監視サーバからインターネット通信。ネットワーク通信による情報の収集・把握によりリスク管理が可能です。

フィードバック制御/集めた環境情報で施設内の空調機器を制御。

モニタリングデータのフィードバックにより、空間全体の最適環境を維持し、各機器の省エネ運転にも貢献します。


トレンドグラフ表示/連続計測により微生物量の経時変化を把握。

異常値を示した場合は製造ラインの停止もでき、万一の不具合にも的確な処置が可能です。(更新間隔最短10分)

多点一括計測/工場内に複数のセンサを配置してデータを一括管理。

複数ポイントの同時モニタリングが可能です。

外観寸法図 (単位: mm)

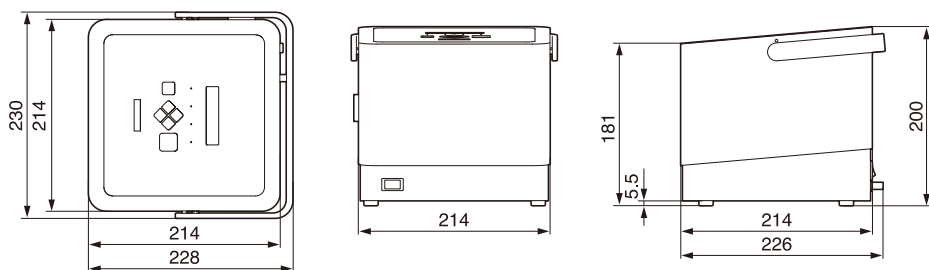

- 当カタログに掲載の内容は、日本国内仕様です。
- 内蔵の捕集プレートは、消耗品となっております。推奨清浄度区分でお使いの場合は、計測回数5,000回を目安に交換が必要です。
- 下記のような環境下でご使用される場合は、正しい計測ができただけでなく、装置の破損・故障や事故につながる可能性がありますので、ご使用しないでください。

- 爆発・発火等を生じ、人体に害を与える恐れのある気体中
- 装置の腐食もしくは変質を生じさせる恐れのある気体中
- ミスト・液滴・油滴や、多量の粉体粒子が存在する気体中

△ アースは必ず接続してください。

本機の電源プラグはアース端子を含む3Pです。3Pコンセントに接続してください。3Pコンセントが無い場合は、付属の3P→2P変換プラグを使用して2Pコンセントに接続できますが、変換プラグのアース線は必ず接続してください。アースが接続されておらず、万が一漏電した場合は火災、感電の原因となります。



日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ● 東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
● 名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
● 大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447



(登録証番号 JQA-2790) (本社にて取得)
ISO9001認証 ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

http://www.kanomax.co.jp/

●お問い合わせ、お求めは